

## **X**-DR Portable Case L WiFi

Mobile Komplettlösung für Pferdepraktiker

Exzellente  
Bildqualität



# Mobiles Detektorsystem für die Pferdepraxis

Wahlweise geliefert mit stabilem Koffer oder in Softtasche

WiFi Verbindung zwischen Detektor und Ultrabook

Cäsiumiodid-Szintillator (CsI) für exzellente Bildqualität

150 µm Pixelgröße für eine optimale Auflösung

Format ideal für Rückenaufnahmen, auch für Kleintiere geeignet

- 35 x 42 cm (14" x 17") aktive Fläche
- Nur 3,7 kg Gewicht



Speziell optimierter Workflow für die Aufnahme am Pferd

Express-Buttons für Ankaufsuntersuchungen



Auch in der Kleintierpraxis verwendbar



# Maximaler Bedienkomfort

## Kabellose Komplettlösung

Das Pferd steht im Mittelpunkt, nicht die Bedienung der Röntgenanlage.

## Optimierte Hardware

- System in wenigen Sekunden einsatzbereit.
- Der Detektor verfügt über AED (Automatische Aufnahmeerkennung und selbstständiger Zyklusbeginn). Kein spezielles Signal vom Auslöseschalter der Röntgenanlage an den Detektor nötig.
- Passend für alle portablen Röntgenanlagen. Ideal kombinierbar mit akkubetriebenen Röntgengeräten der neuesten Generation.

## Intuitive Steuerungssoftware

- Pferdespezifische Organprogramme, modernste Bildprozessierung
- Express-Buttons für Ankaufsuntersuchungen
- Einfache Bildbetrachtung über den radiologischen Viewer mit Befundungstools und Messfunktionen.
- Integrierte Bildarchivierung. Zugriff auf alle archivierten Bilder direkt am Ultrabook.
- Austausch der Bilder mit Kunden und Kollegen über das integrierte Modul X-AQS Dropbox Cloud.

## Grenzenlos mobil

Detektor und Ultrabook kommunizieren direkt miteinander. Im Notfall und bei beengten Platzverhältnissen benötigen Sie nebst dem Röntgenerators nur diese beiden Komponenten, um Ihre Röntgenuntersuchung bis hin zur Befundung durchzuführen.



### Erweiterungsoption

## Stationäres Betrachtungssystem für Ihre Praxis

- Kombiserver zur stationären Betrachtung und Bildspeicherung
- Radiologischer Betrachtungsmonitor EIZO EV2450
- Synchronisation mit dem Archiv des mobilen Detektorsystems
- Export im DICOM- und in anderen Formaten per USB-Stick, DVD und E-Mail

# Die EXAMION GmbH

EXAMION ist ein weltweit agierender Anbieter von Lösungen für die digitale Radiografie in der Human- und Veterinärmedizin. Seit inzwischen 35 Jahren arbeiten wir nach dem Prinzip „Alles aus einer Hand“ und stehen unseren Kunden als kompetenter Ansprechpartner bei Planung, Installation und After Sales Services zur Seite.



Unsere Beratung zu technischen und kaufmännischen Fragen erfolgt immer auf Basis der jeweiligen Kundenanforderung sowie Praxisräumlichkeiten und jedes Angebot wird individuell durch unsere Fachexperten zusammengestellt.


Derzeit werden über 7.000 Systeme betreut, die hauptsächlich fest in Krankenhäusern und Arztpraxen installiert sind, teils aber auch mobil verwendet werden. Die hauseigene Software EXAMION X-AQS zur Gerätesteuerung, Bildbearbeitung, Befundung und Archivierung vereinheitlicht die Steuerung und sichert einen effizienten Workflow. Neben der Radiografie und digitalen Bildverarbeitung umfasst unser Produktportfolio den Bereich Mammografie.

Unsere über 150 Mitarbeiter sind deutschlandweit sowie an vier europäischen Standorten, Belgien, Polen, Portugal und der Schweiz, gemeinsam für unsere Kunden tätig. Weltweit arbeiten wir mit einem stetig wachsenden Netzwerk von Service- und Vertriebspartnern zusammen.


## Von langjähriger Erfahrung profitieren



Röntgenanlagen

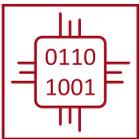

Digitalsysteme

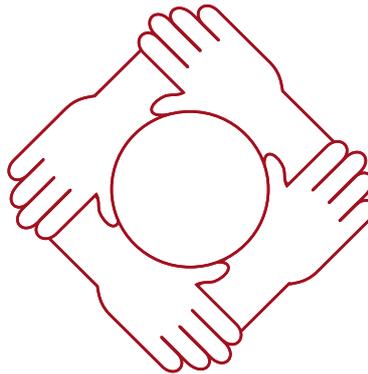

Bildarchive



Services



## Ein Kontakt – Ihr Vertriebs- und Servicepartner vor Ort

### EXAMION GmbH

Erich-Herion-Straße 37  
70736 Fellbach

Telefon: 0711 120 002-0  
Fax: 0711 120 002-22  
E-Mail: [vertrieb@examion.com](mailto:vertrieb@examion.com)  
Web: [www.examion.com](http://www.examion.com)

