

X-R Portable

Portable Röntgengeräte



Lösungen nach Maß für
die medizinische Bildgebung

Warum ein portables Röntgengerät von EXAMION?

Ihr Praxisalltag führt Sie häufig oder ausschließlich in die Stallungen Ihrer Patienten oder die Tiere sind zu groß für die Untersuchung in Ihrer Praxis? Dann benötigen Sie Röntgenequipment, welches Sie begleitet und flexibel eingesetzt werden kann. Die portablen Röntgenlösungen von EXAMION unterstützen Sie bei dieser Aufgabe.

- Stromsparendes LED-Licht an der Blende
- Komfortable Fernsteuerungsfunktionen über den Handschalter
- Flache Touch-Tastatur und digitales LED-Display
- Umkehrung der Anzeige zur besseren Lesbarkeit aus verschiedenen Richtungen
- Stoß- und schmutzabweisende Oberfläche
- Kurzwahltaasten für kV und mAs
- Anzeige des Fokus-Bildempfänger-Abstands durch Dual-Laser



Akkubetriebene Geräte

Akkubetriebene Geräte sind die idealen Begleiter des mobilen Pferdepraktikers. In Kombination mit den ebenfalls akkubetriebenen DR-Kofferlösungen von EXAMION erhalten Sie ein komplett kabelloses, transportables Röntgensystem. Sie haben maximale Bewegungsfreiheit und werden durch kein einziges Kabel gestört.



X-R Portable Air Ray

Das Röntgengerät X-R Portable AirRay ist das Leichtgewicht unter den Röntgengeneratoren. Dank der leistungsstarken Batterie ermöglicht es bis zu 120 Aufnahmen pro Akkuladung und kann darüber hinaus sogar auch per Kabel angeschlossen werden.

- Gewicht: 5,3 kg
- Leistungsdaten: max. 90 kV, max. 20 mA, 1,6 kW bei 80 kV

X-R Portable 20 BT

Das X-R Portable 20 BT ist das kompakteste verfügbare Gerät. Durch sein geringes Gewicht minimiert es bei Ankaufsuntersuchungen die Belastung für den Arzt.

- Gewicht: 7,2 kg
- Leistungsdaten: max. 90 kV, max. 20 mA, 1,6 kW bei 80 kV



X-R Portable 20 BT Plus

Das X-R Portable 20 BT Plus ist optimiert für den Dauerbetrieb. Es hat ein größeres Gehäuse und leitet die bei den Aufnahmen entstehende Wärme effizient ab.

- Gewicht: 11,2 kg
- Leistungsdaten: max. 100 kV, max. 20 mA, 1,6 kW bei 80 kV

X-R Portable 40 BT Plus

Das X-R Portable 40 BT Plus ist das passende Gerät für diejenigen, die auf hohe Leistung Wert legen.

- Gewicht: 14,2 kg
- Leistungsdaten: max. 100 kV, max. 35 mA, 2,4 kW bei 80 kV



Kabelgebundene Geräte

Die Hybridgeräte von EXAMION sind stationär als auch mobil einsetzbar. Die Hybridgeräte mit Kabel sind für Anwender geeignet, die hauptsächlich stationär in der Tierarztpraxis arbeiten, aber das Gerät gelegentlich auch mobil einsetzen wollen. Kabelgeräte bieten darüber hinaus dann Vorteile, wenn man das Gerät nur selten verwendet und sich nicht darum kümmern will, dass der Akku ausreichend geladen ist.

X-R Portable 20 Plus

Das X-R Portable 20 Plus ist durch Gewicht und Abmessungen optimal geeignet für den mobilen Pferdepraktiker.

- Gewicht: 9,8 kg
- Leistungsdaten: max. 100 kV, max. 20 mA, 1,6 kW bei 80 kV



X-R Portable 40

Das X-R Portable 40 ist das ideale Universalgerät für einen Gemischtpraktiker mit stationärer Kleintierpraxis und einem Pferdeanteil, der Mobilität erfordert.

- Gewicht: 12,8 kg
- Leistungsdaten: max. 100 kV, max. 35 mA, 2,4 kW bei 80 kV



X-More: Ergänzende Produkte von EXAMION

Die Kofferlösungen - alles drin

Die Bestandteile der kompakten Röntgenlösungen sind ideal aufeinander abgestimmt und sind eine optimale Ergänzung zu unseren portablen Röntengeräten.

- Detektor
- Laptop oder Ultrabook
- Transportkoffer oder Stoffbag
- Bildakquise mit unserem X-AQS



Röntgenstative

Für komfortables Arbeiten während der Röntgenaufnahme – besonders im mobilen Einsatz – eignet sich ein Röntgenstativ ausgezeichnet. Es entlastet den Anwender und gestaltet die Röntgenuntersuchung dadurch effizienter.



X-R MORE Stand Stat-X portable

- Sehr schnelle und komfortable Montage ohne Werkzeug
- Flexibel und höhenverstellbar
- Sehr leicht (nur 15 kg), gleichzeitig belastbar bis 25 kg
- Zusammengeklappt: 30 cm x 30 cm x 142 cm
- In drei Ausführungen erhältlich:
 1. Klappbares Fahrstativ für portable Röntengeräte
 2. Für CR-Kassetten oder Detektoren
 3. Kombi-Lösung aus Option 1 + Option 2

Die EXAMION GmbH

EXAMION ist ein weltweit agierender Anbieter von Lösungen für die digitale Radiografie in der Human- und Veterinärmedizin. Seit inzwischen 35 Jahren arbeiten wir nach dem Prinzip „Alles aus einer Hand“ und stehen unseren Kunden als kompetenter Ansprechpartner bei Planung, Installation und After Sales Services zur Seite.



Unsere Beratung zu technischen und kaufmännischen Fragen erfolgt immer auf Basis der jeweiligen Kundenanforderung sowie Praxisräumlichkeiten und jedes Angebot wird individuell durch unsere Fachexperten zusammengestellt.


Derzeit werden über 7.000 Systeme betreut, die hauptsächlich fest in Krankenhäusern und Arztpraxen installiert sind, teils aber auch mobil verwendet werden. Die hausinterne Software EXAMION X-AQS zur Gerätesteuerung, Bildbearbeitung, Befundung und Archivierung vereinheitlicht die Steuerung und sichert einen effizienten Workflow. Neben der Radiografie und digitalen Bildverarbeitung umfasst unser Produktportfolio den Bereich Mammografie.

Unsere über 150 Mitarbeiter sind deutschlandweit sowie an vier europäischen Standorten, Belgien, Polen, Portugal und der Schweiz, gemeinsam für unsere Kunden tätig. Weltweit arbeiten wir mit einem stetig wachsenden Netzwerk von Service- und Vertriebspartnern zusammen.


Von langjähriger Erfahrung profitieren



Röntgenanlagen

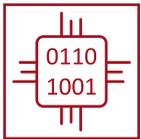

Digitalsysteme

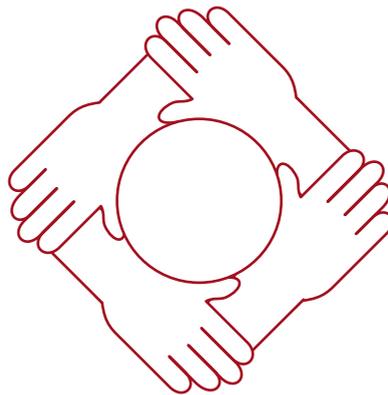

Bildarchive



Services



Ein Kontakt – Ihre Vertriebs- und Servicepartner vor Ort

EXAMION GmbH

Erich-Herion-Straße 37
70736 Fellbach

Telefon: 0711 120 002-0
Fax: 0711 120 002-22
E-Mail: vertrieb@examion.com
Web: www.examion.com

